

ACCESORIOS USADOS EN LAS OSTOMÍAS

CATEGORÍAS GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	INDICACIONES	CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
SISTEMAS DE BOLSAS	<ul style="list-style-type: none"> • De una pieza: el disco y la bolsa son una unidad • De dos piezas: la bolsa se adhiere o se cierra con un clic sobre el disco 	<p>Factores que hay que tener en cuenta al elegir el sistema de bolsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo y consistencia de los residuos • Tamaño del estoma • Destreza manual y agudeza visual • Nivel de actividad física • Recursos económicos preferencias 	
DISCOS O PLACAS	<p>De polímeros sintéticos o material natural (karaya) para proteger la piel de los residuos. Puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano o convexo • De duración normal o prolongada • Con o sin cinta adhesiva • Abertura precortada, cortada a la medida o moldeable • Disponible en tamaño adaptado al neonato y prematuro 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorio para proteger la piel periestomal • Estomas poco prominentes: pueden ser eficaces los discos convexos • Piel sensible o alergias cutáneas: pueden ser eficaces los discos no adhesivos o de karaya • Niños recién operados las bolsas de una pieza ayudan a reducir el dolor y la presión sobre el abdomen • El disco cortado a la medida puede ser útil para quien no tenga mucha destreza 	<ul style="list-style-type: none"> • Usar la convexidad con precaución en las ostomías recién operadas • No se recomiendan los discos precortados para estomas ovalados • Los discos pediátricos tienen tendencia a fundirse más rápidamente, son más flexibles y menos resistentes
BOLSA	<ul style="list-style-type: none"> • Drenable • Cerrada por el extremo inferior • De clip, cierre de velcro o tubo de salida • Clara, opaca. Filtro de gases 	<ul style="list-style-type: none"> • Es una cuestión personal • Los sistemas de urostomías tienen un mecanismo antirreflujo para evitar que la orina vuelva a subir • Los filtros pueden ser útiles cuando hay muchos gases 	<p>No se recomiendan filtros ni bolsas opacas tras la operación</p>

CATEGORÍAS GENERICAS	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	INDICACIONES	CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
POLVOS	Polvos constituidos por un material de barrera cutánea	Absorbe la humedad de la piel periestomal para mejorar la adhesión de la barrera Ayuda a la eliminación de la pasta Rellena los defectos de la separación mucocutánea.	No son necesarios sobre la piel periestomal intacta
RELLENOS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta • Anillos: • Precortados • Moldeables • convexos 	Se usan para rellenar las arrugas y las superficies irregulares de la piel <ul style="list-style-type: none"> • Disminuye la fuga de residuos por debajo de la barrera • La pasta es un relleno, no un pegamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las mayorías de las pastas contienen alcohol; usar con cuidado sobre la piel denudada • Uso de pasta sin alcohol en neonatos prematuros
SELLANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Paños o toallitas • pulverizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Para los pacientes que tienen una sensibilidad conocida hacia los productos adhesivos • Afecciones cutáneas como el eczema • Evita el desprendimiento de la piel • Se puede usar para impermeabilizar la barrera cutánea 	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicados sobre piel denudada a excepción de productos sin alcohol • Se recomiendan productos sin alcohol en neonatos prematuros
ELIMINADORES DE RESTOS ADHESIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Paños 	<ul style="list-style-type: none"> • Acumulación de adhesivo • Piel muy sensible; dolor al retirar los productos 	<ul style="list-style-type: none"> • Piel denudada • Neonatos prematuros
CINTURÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en diferentes tallas para niños 	<ul style="list-style-type: none"> • Para aumentar la estabilidad de la barrera • Para los pacientes muy activos 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de que está correctamente colocado • Evitar apretarlo excesivamente
CINTURÓN PARA HERNIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en diferentes tallas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hernias periestomales 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso prudente con convexidad

**LOS
MÁS USADOS
EN
NEONATOLOGÍA
DEL HUVR**

BOLSA DE UNA PIEZA
HOLLISTER REF.3796 caja de 30 unid.



DISCOS O PLACAS

APÓSITOS HIDROCOLOIDES:
CONFEEL DE COLOPLAST REF. 3110-3539



OTROS: APÓSITO MEPITEL REF. 491399
(lámina de contacto micro adherente para irritaciones de la piel, debe ser usado con apósito absorbente secundario)
APÓSITO MEPILEX REF.294300



RELLENOS

BARRERA CUTÁNEA EN TIRAS REF. 79400 (no contiene alcohol)

BARRERA CUTÁNEA EN TIRAS BRAVA DE COLOPLAST (no lleva alcohol)

ANILLO MOLDEABLE BRAVA DE COLOPLAST REF.12030 (sin alcohol)



ANILLOS CONVEXOS REF. 79520, 79530, 79540, VARIOS TAMAÑOS Y CÓDIGOS DE ADAPT

ANILLOS PLANOS

REF:7805 VARIOS TAMAÑOS DE ADAPT (financiado por S.N.S)

REF:7806 (no financiado por el S.N.S)



PASTAS Y POLVOS


PASTA ADAPT HOLLISTER REF.79300 BAJO CONTENIDO EN ALCOHOL (no financiada por el SNS)

PASTA COLOPLAST REF. 2650 (CONTENIDO BAJO EN ALCOHOL)

PASTA STOMAHESIVE DE CONVATEC REF.183910 LLEVA ALCOHOL

ASKINA CREMA BARRERA

CATRIX POLVOS DE COLÁGENO: para el tratamiento de lesiones en la piel que cicatrizan por segunda intención

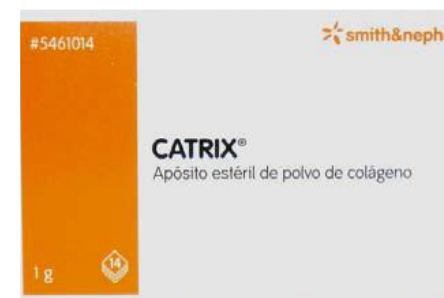

POLVOS ADAPT REF.Hu 7906

POLVOS COLOPLAST REF.1907

(no financiados por el S.N.S)



SELLANTES

ASKINA BRAUN REF.159404

CAVILON REF.3346E

(NO CONTIENEN ALCOHOL)



ELIMINADORES DE RESTOS ADHESIVOS

BRAVA DE COLOPLAST REF.12010 (no lleva alcohol)
REMOVEDOR DE ADHESIVOS DE HOLLISTER REF.7760

(no contiene alcohol) No financiado.

ESPRAY QUITA ADHESIVOS DE HOLLISTER REF:7731

(No contiene alcohol). No financiado por el S.N.S



ESPRAYS ADHESIVOS

ESPRAY ADAPT DE HOLLISTER REF.7730

No contiene alcohol

No financiado por el S.N.S

CINTURÓN PEDIÁTRICO REF.3774



FABRICANTES DE PRODUCTOS DE OSTOMÍA:

CONVATEC: <http://www.convatec.com> 900304050

HOLLISTER: <http://www.hollister.com> 900210947

COLOPLAST: <http://www.coloplast.com> 900210474

ASOCIACIONES Y WEBS:

FEDAO " FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE OSTOMIZADOS"

<http://www.federaciondeostomizados.es/fedao/fedao.nsf/>

correo electrónico: federaciondeostomizados@gmail.com

ARGIA "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE BIZKAIA"

<http://www.ostomizadosargia.com/>

correo electrónico: correo@ostomizadosargia.com Bilbao

AOMA "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS MADRID"

www.asociaciondeostomizados.com

correo electrónico: asociación.aoma@gmail.com Madrid

AROS "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE ALAVA"

Correo electrónico : alava@aecc.es 954 263 297

ADO "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE CÁDIZ"

<http://www.adocadiz.org/>

correo electrónico: ostomiascadiz@gmail.com

AGADO "ASOCIACIÓN GADITANA DE OSTOMIZADOS"

Correo electrónico: agadojerez@gmail.com

EOS "EXPATRIARTE OSTOMATES OF SPAIN"

<http://www.ostomyinspain.org/index.php?section=0>

correo electrónico: mail@ostomyinspain.org

AOGRA "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS GRANADA"

Correo electrónico: asociacionostomizadosgranada@gmail.com

ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS VIRGEN DE LA VIÑA

Correo electrónico: cam-mor@terra.es

"Oncolliga-ACO" Asociación catalana d'ostomitzats

Correo electrónico: Barcelona@oncolliga.org

AOSGUI "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE GUIPÚZCOA"

<http://www.aosgui.com>

correo: aosgui@aosgui.com

ADO ARAGÓN "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE ARAGÓN"

www.ostomizadosaragon.org

correo: adozaragoza@ostomizadosaragon.org

ADO "ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE PONTEVEDRA"

Correo: adoponte@gmail.com

UNITED OSTOMY ASSOCIATIONS OF AMÉRICA

<http://www.ostomy.org>

FUNDACIÓN CONVATEC <http://www.fundacionconvatec.org>

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENFERMERÍA EXPERTA EN ESTOMATERAPIA
<http://estomaterapia.es/>

GRUPOOSTOMÍA <http://sites.google.com/site/grupoostomia/>

OSTOMÍA PROFESIONAL.COM <http://www.ostomiaprofesional.com>

OSTO-MED <http://www.ostomed.com>